

傅里叶光学实验报告

物理 32 冯家琦/周方远 2023011338

摘要

本实验旨在通过搭建傅里叶光学系统，观察并理解光波的衍射、成像、滤波等基本现象，并探究傅里叶光学在光学成像中的应用。

1 实验原理

傅里叶光学是研究光波经过光学系统后的衍射和成像规律的科学。。在光学显微镜中，物体经过物镜衍射后，其衍射图样会分布在物镜的像平面（即傅里叶平面）上。傅里叶平面上的信息包含了物体的全部信息，通过控制傅里叶平面上的滤波器，可以实现对物体成像的调节。本实验采用 4f 光学系统，利用透镜对光波进行变换，在傅里叶平面上观察到光波的频谱信息，并通过滤波等手段实现对图像的处理。

2 实验仪器

仪器：傅里叶光学教学套件 (EDU-FOP2):LED 光源、准直透镜、物镜、套筒透镜、相机、Targetlens、Condenser lens、Aperture Iris、Field Iris、Projection lens、观察屏、分束器、滤光片、Mask

3 实验步骤

我们注意到，中文实验说明书上大概以第 7 个实验为界限，前后光路搭建的顺序并不相同，因此我们在第七个实验后将实验仪器拆卸后重新以另一个顺序搭建。

- 搭建 4f 光学系统，按照文档中提供的步骤进行调节，确保各个光学元件的高度、位置和角度正确。
- 使用相机观察 Target 上的图案，并通过调节焦距和曝光时间获得清晰的图像。
- 调节分束器和 Projection lens，将傅里叶平面上的图像投射到观察屏上。
- 进行以下实验内容：

3.1 开普勒望远镜成像

将 Field lens 和 Condenser lens 依次摆在光源前，并使两者间隔为两者焦距之和。将 Target 放在光源与 Field lens 之间，将屏放置在 Condenser lens 后焦平面处，观察到倒立缩小的图像。

* Field lens 和 Condenser lens 组合后，图像被放大并成倒立。将 Objective lens 放置在 Condenser lens 后两者焦距之和处。将 Target 放在 Condenser lens 前焦平面处，屏放在 Objective lens 后焦平面处，观察到倒立缩小的图像。

* Condenser lens 和 Objective lens 组合后，图像被放大并成正立。



图 1: 开普勒望远镜仪器安装

3.2 开普勒望远镜 (Condenser lens+ Objective lens)

• 将物镜 ($f = 30 \text{ mm}$) 放在 Condenser lens ($f = 50 \text{ mm}$) 后面, 使其焦平面重合; • 将 Target 放在 Condenser lens 的 LED 侧焦平面上, 然后将观察屏放在 O 物镜的后焦平面上观察图像。



图 2: 开普勒望远镜仪器安装

3.3 Projection lens 成像

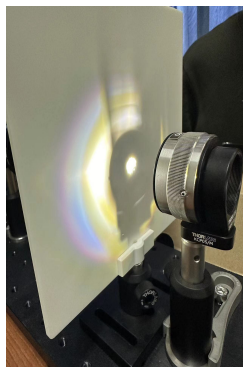


图 3: Projection lens 成像

* 图像从清晰到模糊再到傅里叶平面的变化过程体现了光学成像的原理。

3.4 观察傅里叶面

• 调整 Target 找到晶格（例如：第一行 F2 图案， $g = 15 \text{ m}$ ， $b = 6 \text{ m}$ 晶格）图案的位置，在相机上看到晶格图像的同时可以在观察屏上看到该晶格图案的清晰的傅里叶图像



图 4: 观察傅里叶面

3.5 Field Iris 和 Aperture Iris 的作用

* Field Iris 控制物体照明区域，影响图像亮度。* Aperture Iris 控制成像系统孔径，影响图像分辨率和衍射斑形状。

3.6 光学滤波

* 通过滤波可以突出图像的特定频率成分，实现图像增强或去噪。

3.7 巴比内原理

* 互补结构的傅里叶变换图像相同，验证了巴比内原理。

3.8 图像编辑

* 柔焦可以突出图像的低频成分，暗场成像可以突出图像的高频成分。

3.9 衍射极限分辨率

* 实验验证了阿贝衍射极限定律，只有当至少第一个衍射阶次通过成像系统时，才能形成清晰的图像。

3.10 巴比涅原理

4 实验思考

* 如何进一步提高光学系统的分辨率？* 如何利用傅里叶光学进行图像重建？* 傅里叶光学在哪些领域具有应用前景？

5 总结

- 本实验通过搭建傅里叶光学系统，观察并理解了光波的衍射、成像、滤波等基本现象，并探究了傅里叶光学在光学成像中的应用。实验结果表明，傅里叶光学在图像处理、光学测量等领域具有广泛的应用前景。